


МАСКА МЕДИЦИНСКАЯ

ИНСТРУКЦИЯ ПО РАСПЕЧАТКЕ ВЫКРОЕК И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОШИВА

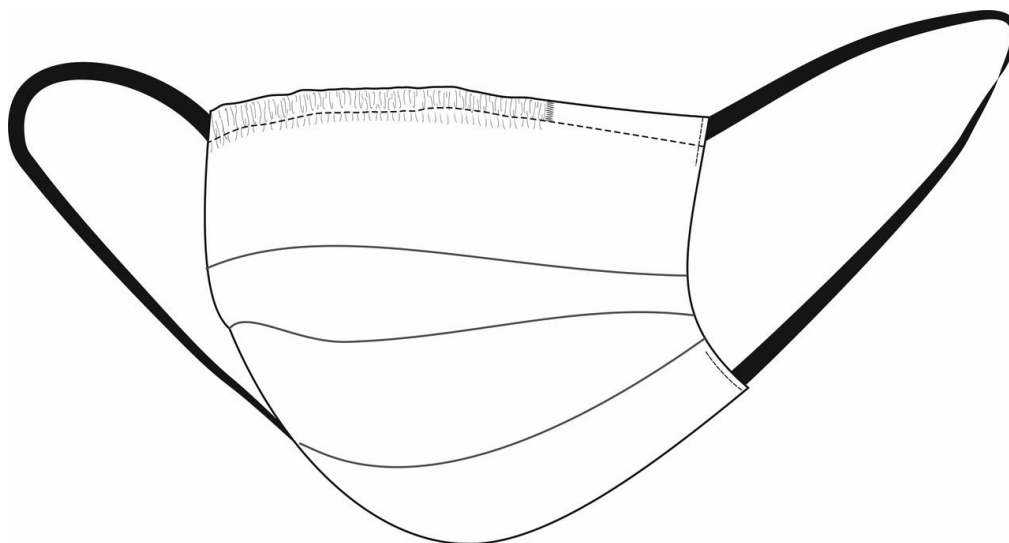

Маска медицинская на эластичных ушных петлях и с носовым фиксатором, двухслойная, многоразовая.

Размеры: S, M, L. Все размеры представлены на одном файле.

Уровень сложности: просто.

Рекомендации по материалам: основной материал - марля, хлопок, лен. Можно в качестве дополнительной прослойки между основной тканью использовать медицинскую вату.

Также потребуются: резинка длиной 40 см или меньше; проволока для носового фиксатора; нитки в цвет основного материала - 1 катушка.

Лайфхак: в качестве носового фиксатора также подойдет проволочный зажим-фиксатор для пакетов.



При заказе выкройки вы получаете 2 pdf-файла:

- Файл с инструкцией по печати выкройки, содержащий контрольный квадрат;
- Файл с выкройкой в формате А4 для печати на обычном принтере.



* ПЕЧАТЬ НА ПРИНТЕРЕ ФОРМАТА А4:

При печати выкройки в формате А4 откройте программу [Adobe Reader](#) и поставьте галочку "Реальный размер" (или снимите галочку "По размеру страницы") в настройках печати. Обратите внимание на тестовый квадрат (или сетку) на листе с выкройкой. Его размер ровно 10 на 10 см. Он нужен для того, чтобы понять - правильно ли настроен на вашем принтере масштаб при печати. Прежде чем печатать всю выкройку, распечатайте лист с красным квадратом и измерьте его. Стороны по 10 см? значит, можно печатать и остальные листы выкройки. Если же стороны больше или меньше 10 см - нужно скорректировать масштаб печати у вашего принтера. Иначе выкройка распечатывается некорректно. После распечатки всех страниц выкройки, склейте их по указанному порядку: буквы (A/B/C+) обозначают столбец, а цифры (01/02/03+) - строку. У первого (левого верхнего) листа выкройки будет номер А01.

* ПЕЧАТЬ НА ПЛОТТЕРЕ:

При печати выкройки на плоттере откройте файл выкройки в программе Adobe Reader (или Foxit Reader). Нажмите на пункт меню "Файл", затем выберите "Распечатать". Выберите режим печати "Постер" в разделе "Настройка размера и обработка страниц". Убедитесь, что в значении поля "Масштаб сегмента" стоит значение 100%. Отметьте галочками поля "Метки вырезки", "Ярлыки" и "Разбить только большие страницы".


На выкройке приняты следующие обозначения:

	Направление долевой нити (эта линия может совпадать с одним из контуров детали)
	Надсечка - контрольный знак для совмещения деталей кроя: При совмещении деталей надсечки с одинаковым цифровыми или буквенными обозначениями должны совпасть.
СГИБ_ДЕТАЛИ	Линия, вдоль которой нанесена эта надпись является линией симметричного разворачивания детали
4 А 2	Цифрами и буквами обозначены точки совмещения одной или нескольких деталей

Спецификация деталей

1. Основная деталь - 2 детали

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОШИВА

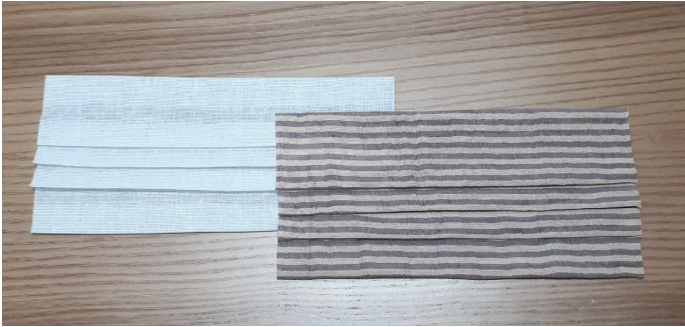

1. Заложите складки, как показано на лекале (основная деталь) и закрепите булавками или наметайте. Приутюжьте.



2. Сложите детали маски лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте боковые и верхний срезы. Сколите и обтачайте боковые срезы, шириной шва 15 мм, оставляя отверстие для продевания фиксатора и резинки. Затем обтачайте верхний срез, шириной шва 15 мм. Приутюжьте.



3. Выверните на лицевую сторону. Расправьте швы и приутюжьте.



4. Проложите отделочную строчку на расстоянии от верхнего края 10 мм. По нижнему краю (срез заутюженный на изнанку на 15 мм) проложите отделочную строчку от сгиба 1 - 2 мм. Приутюжьте. Вставьте носовой фиксатор (проволока для носового фиксатора).

